

Contenido del paquete

- 1) "Eocene Tracker"
- 2) Adaptador de DC 5V
- 3) Línea de teléfono
- 4) Manual de propietario y guía de referencia rápida

Asegure por favor de que su Eocene contenga todos los artículos ilustrados. Si alguno de los artículos faltan, por favor vuelve el producto al lugar original de compra o póngase en contacto con un Infopia USA representante de apoyo al cliente a 1-888-446-3246.

Remote Home Patient Monitoring System

Eocene™ Comprehensive Diabetes Management & Compliance System

EOCENE SYSTEMS

Guía de Referencia Rápida



Manufactured Exclusively for
Infopia USA, LLC
P.O.Box 5532
Titusville, FL 32783
TEL: 888-446-3246
www.infopiausa.com


VIRTUAL TRACKER

Catalog number GL-5C7-1B1-01

OPERACIONES




1. Inserte y presione con firmeza su Medidor Infopia boca arriba dentro del "Eocene Cradle" hasta que pare. Cuando el medidor esté adecuadamente insertado, la luz del medidor (Meter) en su aparato se encenderá.

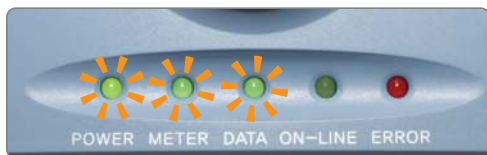

2. Una vez que el "Eocene Cradle" esté insertado la luz de datos (Data) empieza a parpadear, esto significa que el aparato está buscando nuevas lecturas. Si la luz de datos (Data) se apaga esto significa que no hay lecturas nuevas.



3. Si su "Eocene Cradle" encuentra resultados nuevos, la luz de los datos (Data) y la luz de en línea (On-Line) se encenderá. Esto significa que sus resultados de la prueba se están transfiriendo. (Nota: No interrumpa este proceso.)

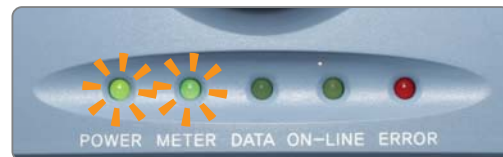

4. Una vez que la transmisión esté completa la luz de los datos (Data) se apagará seguido por la luz de en línea (On-Line). Ahora podrá quitar su medidor del "Eocene Cradle".



5. La manera más sencilla de quitar el medidor del aparato es manteniendo el aparato con ambas manos y poniendo sus dedos índices en la espalda del aparato, utilice los pulgares para empujar el medidor como mostrado a cabo.

Observe por favor:

- a. "Eocene Cradle" sólo funcionará con una línea telefónica analógica o línea "POTS" (Servicio Telefónico, Ordinario y Simple). No va a trabajar con una línea telefónica digital, cable, o servicios de Internet VoIP. Esto puede ser verificado contactando a su proveedor de servicio telefónico.
- b. Si usted tiene una computadora y acceso a Internet, puede descargar el "Eocene software" en su computadora y utilizar un "Cable USB" para cargar sus resultados de prueba al sistema "Eocene" (El "Cable USB" se vende por separado)

Quite por favor su medidor inmediatamente del "Cradle": ¡Dejándolo en la base agotará la batería!